

# PM - 50

## Pulsioxímetro

Hand - held



- Compacto y ligero
- Grabación de datos, apagado y standby automático
- Almacena hasta 100 IDs de pacientes y 200 grabaciones
- Transferencia de datos a PC o impresora
- Funciona con pilas AA alcalinas o baterías recargables
- Funcionamiento para pacientes adultos o pediátricos



# PM - 50

||||| Pulsioxímetro Hand - held |||||

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El pulsioxímetro PM-50 ha sido ideado para la medición no invasiva puntual de la saturación de oxígeno funcional de la hemoglobina arterial.

### Rango de Pacientes

Adulto, Pediátrico y Neonatal.

### SpO2

Rango	0-100%
Resolución	1%
Precisión	70% a 100% ± 2% adulto ± 3% neonatal
Método	Onda de led dual

### Ritmo cardíaco (pulso)

Rango	25-254 ppm
Resolución	1 ppm
Precisión	± 2ppm

### Pantalla

Tipo	LCD retroiluminado
Parámetros	SpO2, PPM, intensidad de pulso
Estados	En espera. Comunicación. Descarga.
Información	ID paciente, indicador de datos almacenados, batería baja, error.

### Dimensiones y Peso

Peso	130 gramos sin baterías
Tamaño	140 x 65 x 31 mm

### Batería

Tipo	4 pilas alcalinas AA o 4 pilas recargables AA
Duración	15 horas aprox. en funcionamiento continuo

### Ambiental

Temp. funcionamiento	0° a 50° C
Temp. almacenaje	-20° a 60°C
Humedad de funcionamiento	15% HR - 95% HR
Humedad de almacenamiento	10% HR - 95% HR

### Clasificación


Tipo de protección	Equipo alimentado internamente
Grado de protección	BF
Seguridad	IEC 60601-1, EN 965, ISO 14971

### Memoria

ID de paciente	Hasta 100
Datos grabados	Hasta 200

### Conexiones

Puerto COM	RS-232
Software aux.	Administración e impresión de datos a través de PC

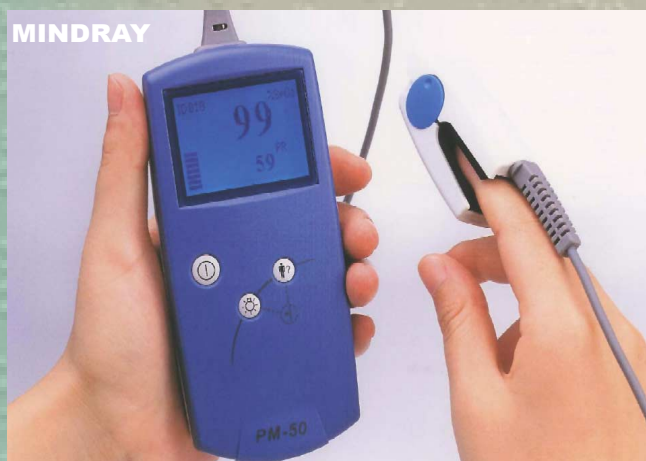

### ||||| Sensores |||||



Adulto



Multi-funcional



Neonatal



**lessa**

PAPELES REGISTRALES

c/ Llobateras, 14-18 Talleres 7, Nave 4 - Pol. industrial Santiga  
Apto. de correos 368 - 08210 - BARBERÁ DEL VALLÉS - Barcelona (España)  
Telf. 34/93 7299400 - Fax. 34/93 7191656  
E-mail: lessap@lessap.com - <http://www.lessap.com>

